




PRODUKTOVÝ KATALOG

SNADNÝ ZPŮSOB JAK ŽIVIT VAŠE PACIENTY

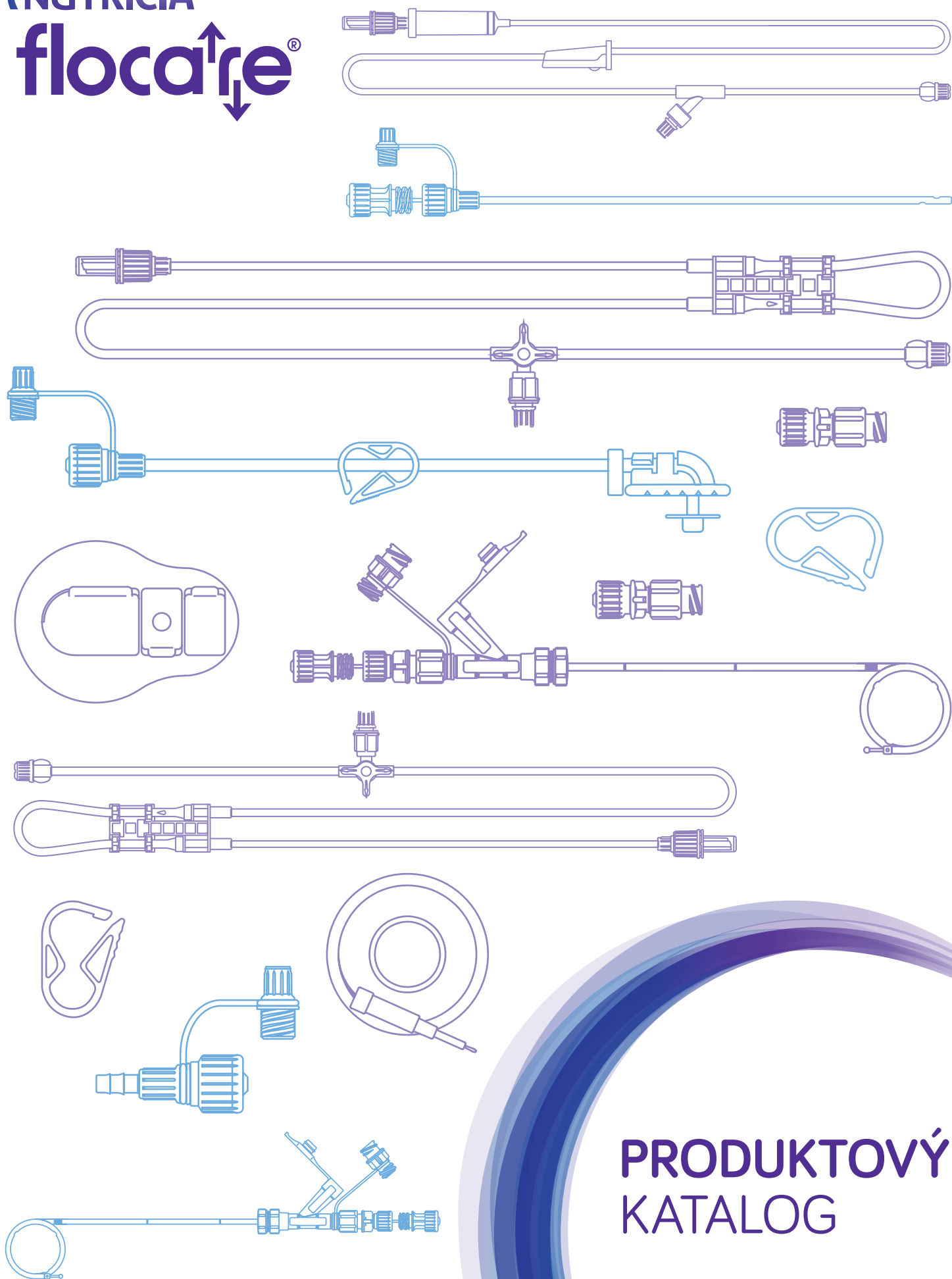

Používejte ucelený systém produktů
Flocare® ENFit™

ISO 80369-3

Aktuální standard
pro bezpečné
enterální živení

NUTRICIA
flocare®

PROČ KOMPLETNÍ SYSTÉM?



BEZPEČNĚJŠÍ

Eliminace možných selhání lidského faktoru

Používáním kompletního systému Flocare® ENFit™ eliminujete možnost chybného připojení.



RYCHLEJŠÍ

Vzájemně kompatibilní

Používáním kompletního systému Flocare® ENFit™ aplikační materiál propojíte snadno a rychle.



SNADNĚJŠÍ

Bez dodatečných konektorů

Systém Flocare® ENFit™ je vzájemně kompatibilní. Při používání kompletního systému Flocare® ENFit™ se vyhnete potížím spojeným s výběrem vhodných konektorů pro různé použití.



STANDARDIZOVANÝ

Zaměřen na zvýšení bezpečnosti a kvality péče o pacienty

Používání bezpečnějších produktů a postupů je součástí akreditačních standardů ve zdravotnických zařízeních.



Společnost Danone a. s. má **zavedený a certifikovaný systém managementu kvality na zdravotnické prostředky** podle mezinárodní normy EN ISO 13485:2016.

USNADNĚTE SI PRÁCI A MĚJTE JISTOTU, ŽE JE PACIENT V BEZPEČÍ.
Žádejte ENFit™ u veškerého aplikačního materiálu pro podávání enterální výživy.

Vysvětlivky:



Výměna nejpozději
po 24 hodinách



Bez obsahu ftalátů a latexu



CE certifikace
zdravotnického prostředku



Pro živení
gravitačním spádem



Pro enterální pumpu
Flocare® Infinity™



Pro enterální pumpu
Flocare® 800



Transnasální sonda



Perkutánní sonda



Živení do žaludku



Živení do jejunu



Pro dětské pacienty



Pro střednědobé živení
po dobu nejdéle 6 týdnů



Pro dlouhodobé živení (předvídaná
doba živení více než 2–3 týdny)




Mezinárodní barevné kódování Charrière:



Nutricia Flocare® obsah:

- Aplikační sety | 6
- Aplikační sondy | 10
- Pomůcky pro aplikaci enterální výživy | 16
- Přehled produktů | 19

APLIKAČNÍ SETY

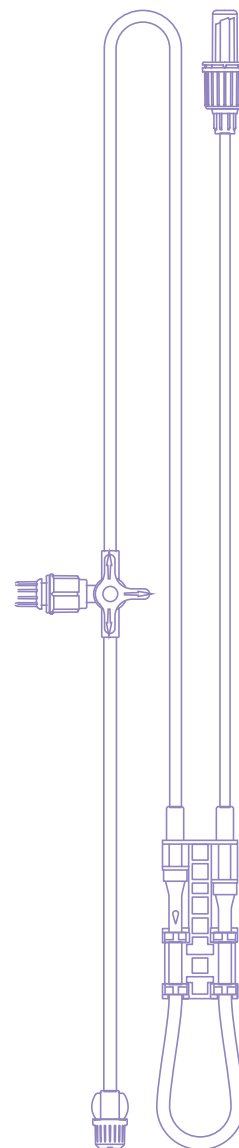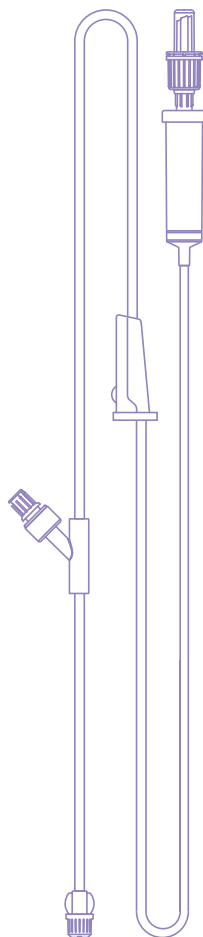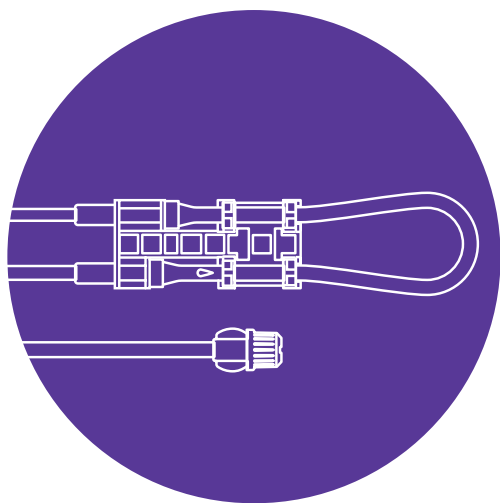

Sety Flocare® jsou zdravotnické prostředky, které spolehlivě podávají enterální výživu Nutrison, Nutrini a další. Jsou moderní, praktické a vyrobené z materiálů šetrných ke zdraví i životnímu prostředí. Identifikujete je mimo jiné díky fialovému odstínu hadiček.

- odolné a spolehlivé
- fialová barva pro optické odlišení
- komfortní materiály
- bez obsahu latexu a DEHP
- se systémem konektorů ENFit™

GRAVITAČNÍ SETY

Dávkování s přehledem

Transparentní kapací komůrka
(20 kapek = 1 ml)

Precizní dávkování

Snadno ovladatelný
regulátor průtoku

Fialová barva hadiček

Pro optické odlišení systému
pro podávání enterální výživy

ENFit™

Bezpečnost a konektivita

S ENFit™ konektorem

Y medikační port


Snadný průtok výživy

Vnitřní průměr
hadičky – 3,9 mm

- Spolehlivé gravitační sety pro podávání enterální výživy o délce 180 cm.
- Vyrobené ze zdravotně nezávadných a komfortních materiálů bez obsahu latexu a DEHP.
- Opatřené systémem konektorů ENFit™ pro vyšší stupeň ochrany zdraví pacienta.
- Dostupné v samostatných verzích pro vaky a pro lahve.



Flocare® Gravity Bottle Set Gravitační set na láhev

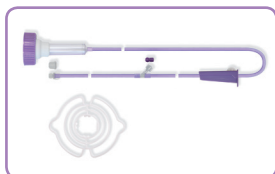

APA: 3 386 381
REF: 590 070


- Podání výživy do sondy z lahvi
- Pro hrdlo Ø 40 / 26 mm
- S medikačním portem

Kompatibilní s lahvemi:

Nutrison 500 ml
Infatrin 125 ml
Infatrin Peptisorb 200 ml



Flocare® Gravity Pack Set Gravitační set na vak

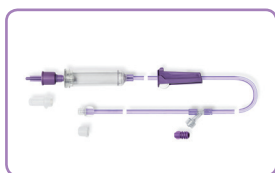

APA: 3 386 399
REF: 586 460

- Podání výživy do sondy z vaků a lahví OpTri bottle
- S medikačním portem


Kompatibilní s vaky:

Nutrison, Nutriini

Kompatibilní s lahvemi
OpTri bottle: Nutrison




Sety na pumpu Flocare® Infinity™

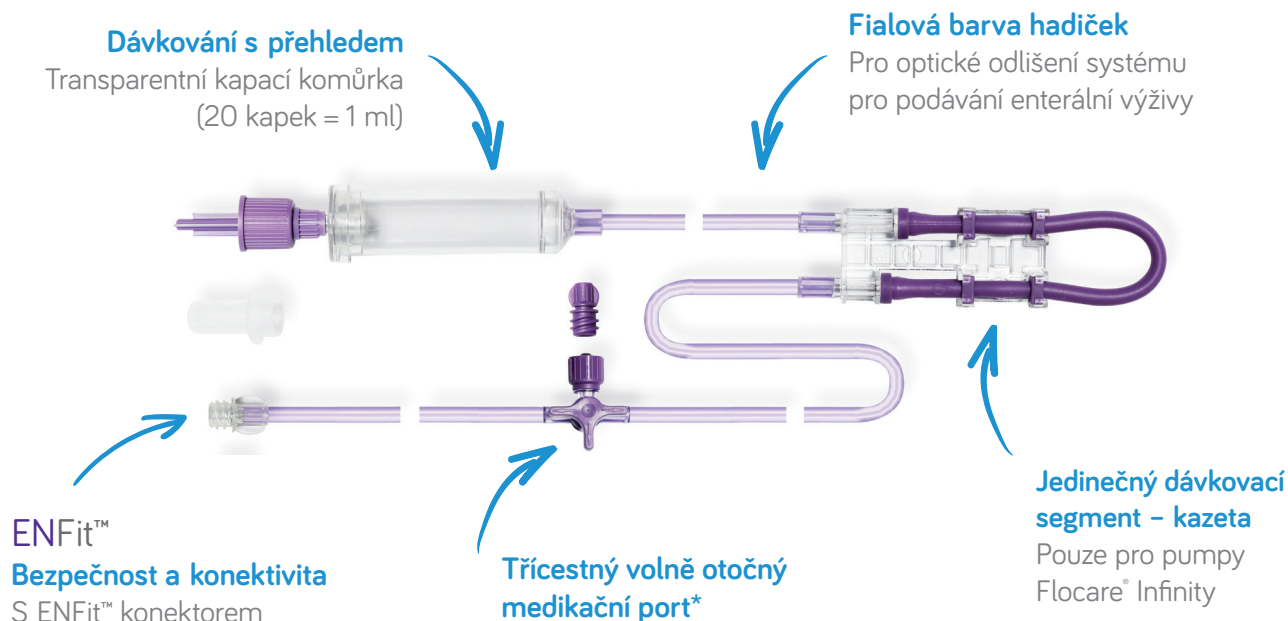

- Spolehlivé moderní sety pro podávání enterální výživy pomocí pumpy Flocare® Infinity™.
- Vyrobené ze zdravotně nezávadných a komfortních materiálů bez obsahu latexu a DEHP.
- Opatřeny systémem konektorů ENFit™ pro vyšší stupeň ochrany zdraví pacienta.
- Dostupné v běžné a mobilní variantě.



Flocare® Infinity™ Pack Set Set pro pumpu Infinity™ na vak

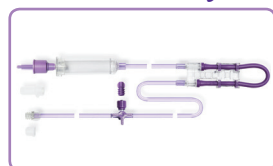

APA: 3 386 415
REF: 586 514

- Podání výživy do sondy z vaků a lahví OpTri bottle
- Délka setu 230 cm
- S medikačním portem
- Vhodné zejména pro pacienty na lůžku

Kompatibilní s vaky:

Nutrison, Nutriini

Kompatibilní s lahvemi OpTri bottle:

Nutrison



Flocare® Infinity™ Pack Mobile Set Set pro pumpu Infinity™ na vak mobilní



APA: 3 403 988
REF: 586 520

- Podání výživy do sondy z vaků a lahví OpTri bottle
- Délka setu 158 cm
- S medikačním portem
- Vhodné zejména pro mobilní pacienty

Kompatibilní s vaky:


Nutrison, Nutriini

Kompatibilní s lahvemi OpTri bottle:

Nutrison



Flocare® Infinity™ Pack Mobile Set W/O MP Set pro pumpu Infinity™ na vak mobilní bez portu pro podávání léků

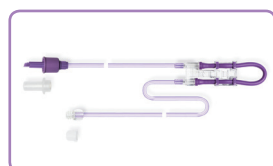

APA: 3 386 407
REF: 586 484

- Podání výživy do sondy z vaků a lahví OpTri bottle
- Délka setu 158 cm
- Bez medikačního portu
- Vhodné zejména pro mobilní pacienty

Kompatibilní s vaky:

Nutrison, Nutriini

Kompatibilní s lahvemi OpTri bottle:

Nutrison



*Není u verze mobile W/O MP


Sety na pumpu Flocare® 800

Fialová barva hadiček

Pro optické odlišení systému pro podávání enterální výživy

Dávkování s přehledem

Transparentní kapací komůrka (20 kapek = 1 ml)

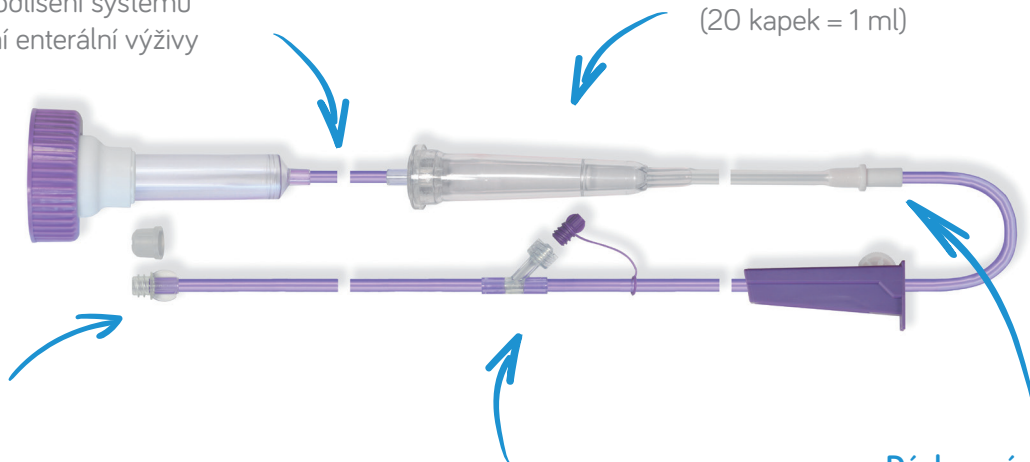

ENFit™

Bezpečnost a konektivita

S ENFit™ konektorem

Y medikační port


Dávkovací segment

Kompatibilní s pumpami Flocare® 800

- Spolehlivé sety pro podávání enterální výživy pomocí pumpy Flocare® 800
- Vyrobené ze zdravotně nezávadných a komfortních materiálů bez obsahu latexu a DEHP.
- Opatřeny systémem konektorů ENFit™ pro vyšší stupeň ochrany zdraví pacienta.
- Dostupné v samostatných verzích pro vaky a pro lahve.



Flocare® 800 Bottle Set Set pro pumpu Flocare® 800 na láhev

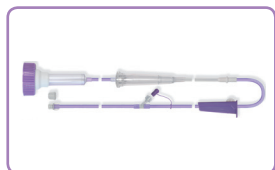

APA: 3 386 183
REF: 590 082

- Podání výživy do sondy z lahví
- Délka setu 230 cm
- S medikačním portem

Kompatibilní s lahvemi:

Nutrison 500 ml
Infatrin 125 ml
Infatrin Peptisorb 200 ml



Flocare® 800 Pack Set Set pro pumpu Flocare® 800 na vak



APA: 3 386 175
REF: 586 512

- Podání výživy do sondy z vaků a lahví OpTri bottle
- Délka setu 230 cm
- S medikačním portem

Kompatibilní s vaky:



Nutrison, Nutrin

Kompatibilní s lahvemi

OpTri bottle:
Nutrison




APLIKAČNÍ SONDY

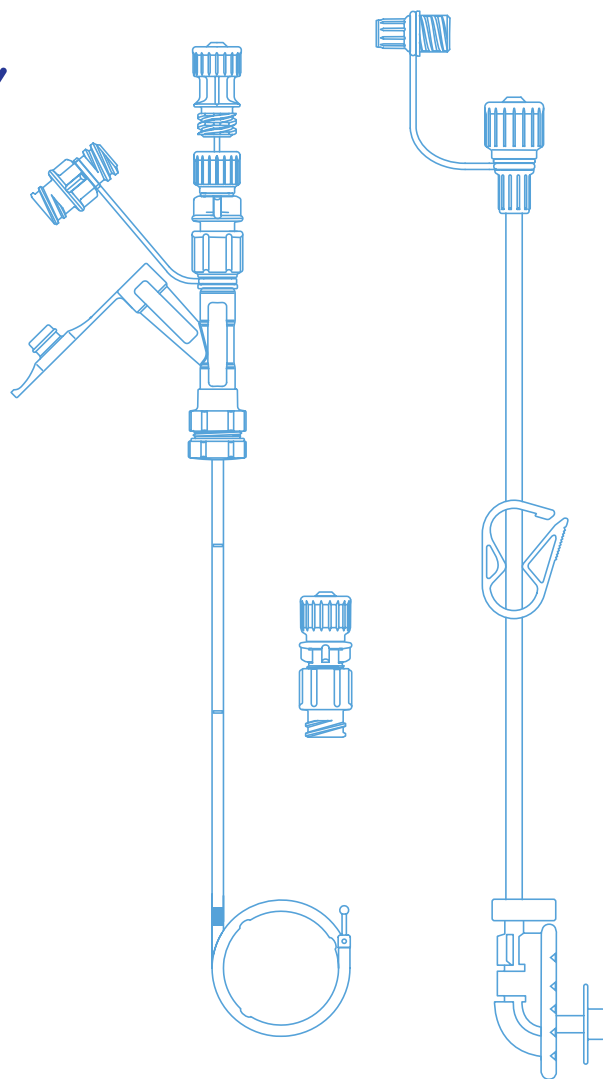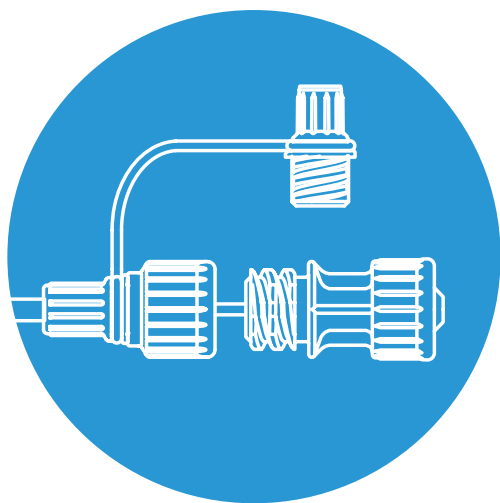

Sondy Flocare® jsou moderní a spolehlivé zdravotnické prostředky pro podání enterální výživy, vyvinuté a vyráběné se zaměřením na komfort pacienta a usnadnění práce pro zdravotníky. Jsou vyrobené z materiálů šetrných ke zdraví i životnímu prostředí.

- odolný, komfortní a poddajný materiál
- zaoblené zakončení pro snadné zavádění
- bez obsahu latexu a DEHP
- se systémem konektorů ENFit™
- dlouhodobá skladovatelnost


Flocare® transnasální sondy

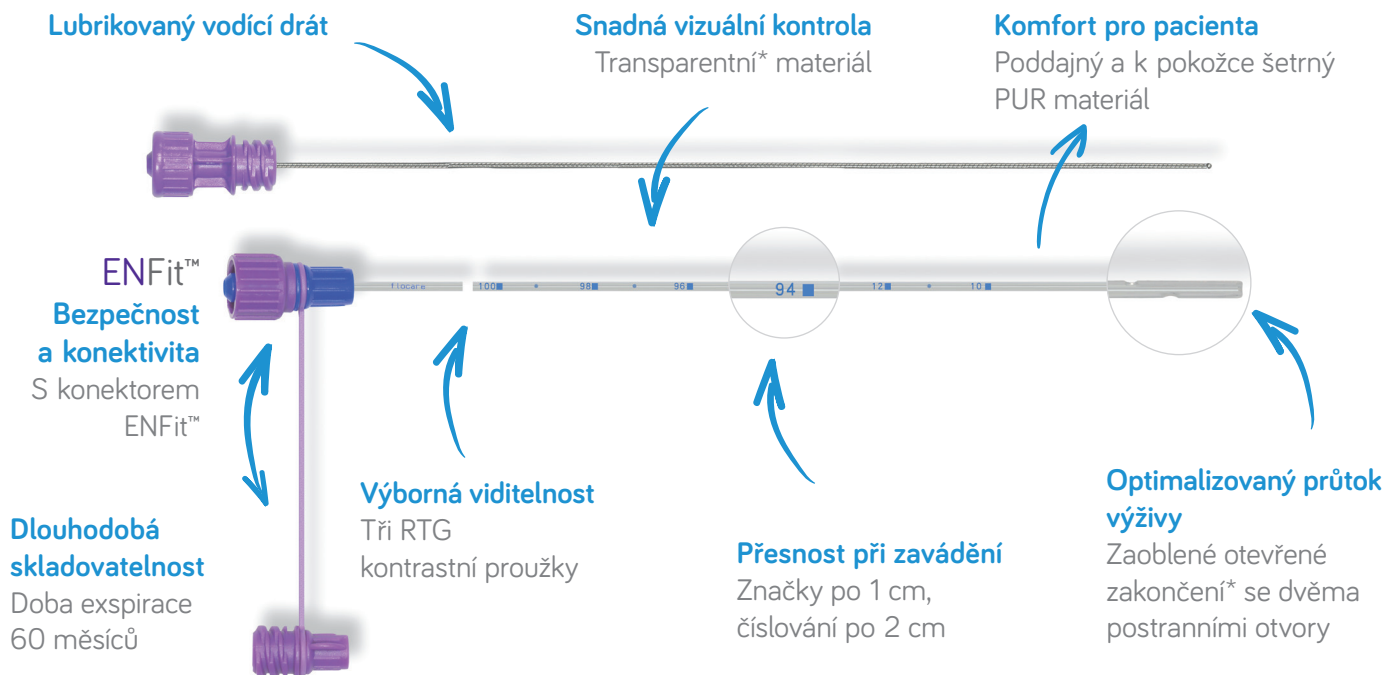

- Nasogastrická RTG kontrastní polyuretanová sonda s vodícím drátem a konektorem ENFit™ pro optimální střednědobé živení do žaludku (≤ 6 týdnů).
- Snadno se zavádí a přináší maximální komfort pro pacienta.



8 Flocare® PUR Tube (Ch8-110 cm) Sonda PUR

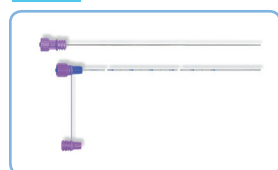


APA: 3 286 987
REF: 594 569

- Nasogastrická sonda
- S otevřeným zakončením
- Průsvit CH 8
- Délka sondy 110 cm



5 Flocare® Pur Tube (Ch5-50 cm) Sonda PUR

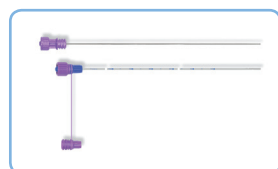


APA: 3 286 979
REF: 594 566

- Nasogastrická sonda
- S otevřeným zakončením
- Průsvit CH 5
- Délka sondy 50 cm
- Vhodná pro děti



8 Flocare® PURSOFT Tube with Guidewire (Ch8-125 cm) Sonda PURSOFT s vodícím drátem

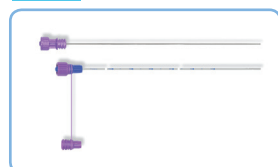

APA: 3 286 961
REF: 594 580

- Nasogastrická sonda
- S uzavřeným zakončením
- Průsvit CH 8
- Délka sondy 125 cm



*Neplatí pro Flocare® PURSOFT Tube with Guidewire (Ch8-125 cm)

Flocare® Bengmark® NI sondy

Výborná viditelnost

Tři RTG kontrastní proužky

Délka sondy 145 cm

Lubrikovaný vodící drát

Komfort pro pacienta

Poddajný a k pokožce šetrný
PUR materiál

ENFit™

Bezpečnost a konektivita

S konektorem
ENFit™

Dlouhodobá skladovatelnost

Doba expirace
60 měsíců

Přesnost při zavádění

Značky po 1 cm,
číslování po 2 cm

Snadné zavádění

Kuličkové zakončení
pokryto vrstvou
Hydromer®


Optimální fixace sondy

Patentovaná spirála
Bengmark® s 2,5 smyčkami
o průměru cca 3 cm
a délkou 23 cm

- Nasointestinální radiokontrastní polyuretanová sonda o délce 145 cm, s vodícím drátem a konektorem ENFit™.
- Vhodná pro transnasální živění přímo do duodena nebo jejunu.
- Určená na střednědobé živění pacientů (≤ 6 týdnů).
- Snadno se zavádí a přináší maximální komfort pro pacienta.
- Dostupná ve 2 variantách průsvitu.



8 Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch8-145 cm) BENGMARK® nasointestinální sonda

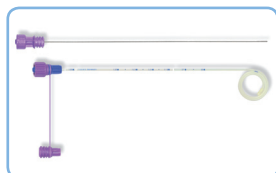

APA: 3 404 002
REF: 594 824




Indikace sondy Flocare® Bengmark®

Tato sonda je indikována pro pacienty s funkčním intestinálním traktem s oslabenou motilitou žaludku a/nebo zvýšeným rizikem aspirace (např. v raném pooperačním období).

Indikace pro postpylorickou sondovou výživu:

- Chirurgičtí pacienti
- Pacienti s popáleninami
- Pacienti se zvýšeným rizikem aspirace refluxu a/nebo zvracení
- Pacienti s omezenou motilitou žaludku
- Pacienti s akutní pankreatitidou

10 Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch10-145 cm) BENGMARK® nasointestinální sonda

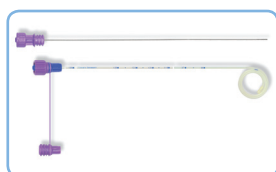


APA: 3 403 947
REF: 594 825



Informace z návodu k použití

- 1 Vodící drát zcela zasuňte do sondy a ujistěte se, že je pevně uchycený ke konektoru (obr. 1). Informujte pacienta o postupu zavedení.
- 2 Pacienta umístěte do pohodlné polohy vsedě nebo pololeže. Pro stanovení délky sondy Bengmark®, která má být zavedena, změřte vzdálenost od špičky nosu (A) k uchu (B) a následně k mečovitému výběžku hrudní kosti (C) – (obr. 2). Sondou v tomto bodě označte. Následně udělejte další dvě značky 25 cm a 50 cm za první značkou.
- 3 Konec sondy navlhčete vodou pro snadnější intubaci (obr. 3).
- 4 Určete si vhodnou nosní díрку a sondu zasuňte po spodní části nosní dířky (obr. 4). V okamžiku, kdy sonda dosáhne oblasti krku, předkloněte hlavu pacienta a požádejte jej, aby polykal tak často, jak je to možné. Sondou tlačte jemně dopředu, nikoliv silou. Vyvarujte se nechtěnému zasunutí sondy do trachey! Pokračujte, dokud se nedostanete k první předem vyznačené značce. Pozor! V této fázi nespojujte nasointestinální sondu Bengmark® s vyživovacím setem (obr. 5). Předtím než sondou projde jakákoliv tekutina, je třeba ověřit správné umístění.
- 5 Po kontrole umístění sondy (obr. 6, 7, 8) aplikujte nejméně 20–50 ml vody (obr. 9).
- 6 Vytáhněte ±25 cm vodícího drátu ze sondy (obr. 10). Potom pokračujte v zavádění sondy, dokud nedosáhnete druhé značky (obr. 11). Nyní vytáhněte celý vodící drát.
- 7 Sondou ještě nepřipevňujte k nosu, dočasně použijte k fixaci ucho.
- 8 V průběhu 8–12 hodin motilita žaludku posune sondu přes pylorus (obr. 12). Zafixujte sondu, jakmile se třetí značka sondy nachází u pacientova nosu (obr. 13).
- 9 Před podáním jakékoliv enterální výživy ověřte správné umístění sondy prostřednictvím RTG (obr. 14).

- Podáním nápoje či jídla můžete pozitivně stimulovat pohyb sondy. V případě potřeby (např. u pediatrických pacientů), lze délku sondy zkrátit a nasunout nový Flocare® konektor se stejným Charrière.
- Polohu sondy kontrolujte vždy při výměně výživy, vždy v případě pochybností o správném umístění sondy a nejméně 3x denně (obr. 6, 7, 8).
- Sondou proplachujte 20–50 ml vody (obr. 15) před a po podání výživy nebo léků a nejméně každých 8 hodin, abyste předešli ucpání sondy.
- Doporučuje se zavést novou sondu Flocare® Bengmark® každých 6–8 týdnů (obr. 16).
- Při aplikaci výživy do střeva se doporučuje vždy používat enterální pumpu, aby bylo možné kontrolovat průtok.
- V případě zachované motility žaludku je možné sondu umístit i do žaludku (prostudujte si příslušné pokyny k použití), spirála Bengmark® podporuje spontánní pasáž potravy přes pylorus v rozpětí 8–12 hodin.
- Pokud je u daného pacienta výrazně omezená nebo žádná žaludeční motilita, sondu je možné přesunout přes pylorus dále pomocí alternativní techniky, např. s využitím endoskopie nebo fluoroskopie. Alternativně je možné žaludeční motilitu zlepšit prostřednictvím medikace.
- Sondou Flocare® Bengmark® je možné vyjmout jemným vytažením sondy z pacientova nosu. Vyjmutí sondy je třeba vždy provádět pod lékařským dohledem.

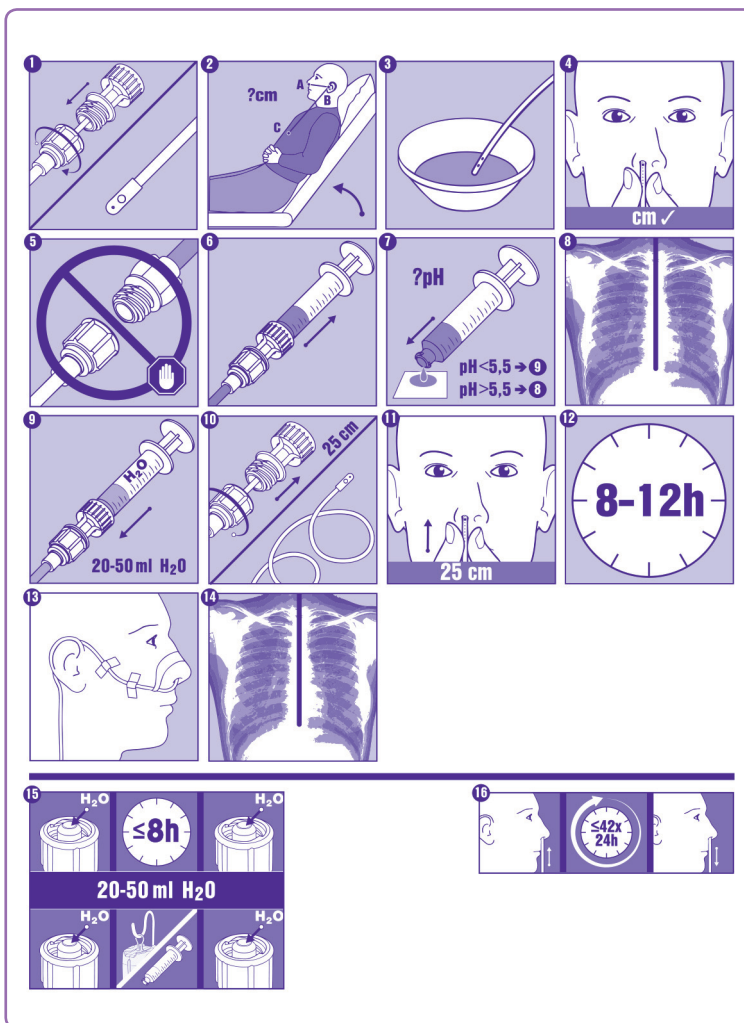

Před použitím tohoto zdravotnického prostředku je nutné přečíst celý návod k použití.

Flocare® PEG sety

Snadné zavádění

Zakončení
pokryto vrstvou
Hydromer®

Komfort pro pacienta

Velmi trvanlivý, poddajný,
k pokožce šetrný
materiál.

Výborná viditelnost

Tři RTG kontrastní pruhy

Přesnost při zavádění

Značení po 1 cm
do vzdálenosti 12 cm
od vnitřního disku

ENFit™

Mimořádná bezpečnost


Modrá fixační
svorka
a konektor
ENFit™

Kapkovitý tvar silikonového
vnějšího kotouče

Dlouhodobá skladovatelnost

Doba expirace
60 měsíců

- Souprava Flocare® PEG pro perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG) je určena pro zavedení pomocí techniky „pull“, při současné endoskopické kontrole.
- Zavedení sondy PEG je indikováno při dlouhodobém podávání výživy pomocí sondy a při žaludeční dekompresi.
- Délka sondy 40 cm, dostupná ve verzích CH 10, CH 14 a CH 18.
- Sondu CH 18 je možno využít také pro zavedení PEG/J.

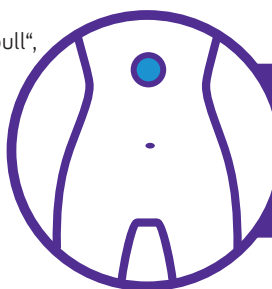

10 Flocare® PEG Set (Ch10)

Souprava pro perkutánní endoskopickou gastrostomii



APA: 3 286 938
REF: 594 820
ZUM: 009 223 7



14 Flocare® PEG Set (Ch14)

Souprava pro perkutánní endoskopickou gastrostomii



APA: 3 286 946
REF: 594 821
ZUM: 009 223 7



18 Flocare® PEG Set (Ch18)

Souprava pro perkutánní endoskopickou gastrostomii



APA: 3 286 953
REF: 594 822
ZUM: 009 223 9




Součástí sady:


- 1 Transparentní PUR sonda o délce 40 cm, vnitřní silikonový fixační disk
- 2 Vnější silikonový kotouč pro maximální pohodlí pacienta
- 3 Modrá fixační svorka sondy
- 4 Skalpel
- 5 Zaváděcí jehla s trokarem
- 6 Drát s očkem pro pohodlné a bezpečné napojení na smyčku sondy
- 7 ENFit™ konektor pro podávání výživy
- 8 Rychle uvolnitelná svorka

Náhradní PEG konektory dostupné jako samostatné díly
(viz str. 18): Flocare® PEG connector (Ch10), (Ch14), (Ch18)

Flocare® PEG/J sonda

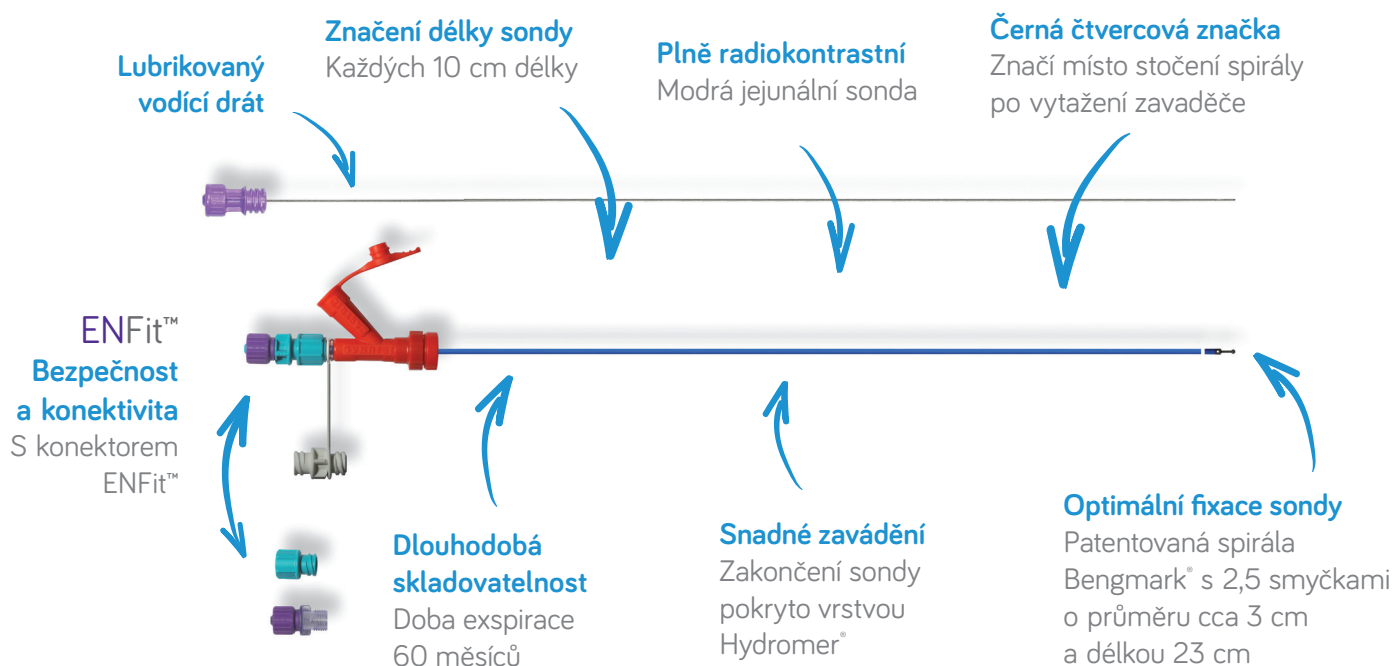

- Polyuretanová modrá sonda CH 9 v délce 105 cm, určená pro endoskopické umístění do jejunu přes sondu PEG CH 18.
- S vodícím drátem, bengmarkovou spirálou a anténním zakončením sondy.
- S konektorem ENFit™.
- Sonda PEG/J je určená pro střednědobé živení do jejunu.
- Výhoda použití PEG/J sondy je především v diskrétním umístění pod oděvem pacienta a vyhnutí se podráždění pokožky v okolí nosu.

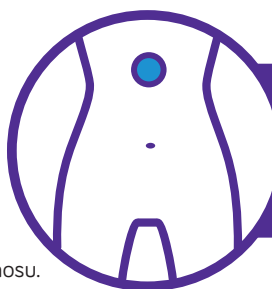

9 Flocare® Bengmark® PEG/J for use with Flocare® PEG CH 18 (Ch9-105 cm) Jejunální výživová sonda pro použití s PEG CH18




APA: 3 286 920
REF: 594 823
ZUM: 009 224 0




Části sondy:

Sonda (A), anténní zakončení se dvěma bočními otvory (B), lubrikovaný vodící drát, částečně zasunutý do sondy (C). ENFit™ konektor: fialová (D) a tyrkysová (E) část umožňují spojení jejunální sondy s Y konektorem. Gastrické ústí Y konektoru (F) je vybaveno trychtýřovitým konektorem, který umožňuje spojení stupňovitého konektoru s drenážním vakem. Jejunální ústí Y-konektoru (G) je sestavené a připojené k jejunální sondě. Y-konektor (červený): umožňuje dekompresi žaludku (aspiraci žaludečního obsahu) a zároveň živení do tenkého střeva. Y-konektor zahrnuje vnitřní neoddělitelný kroužek (H) pro připojení k sadě PEG, a dále samostatný – oddělitelný, červený kroužek – matici (I) pro pevnou fixaci spojení s PEG. Tyrkysový kroužek (J) na horní části Y-konektoru umožňuje spojení s jejunální sondou. Náhradní konektory pro fixaci po umístění sondy do jejunu: Transparentní (K) a tyrkysová část (L).

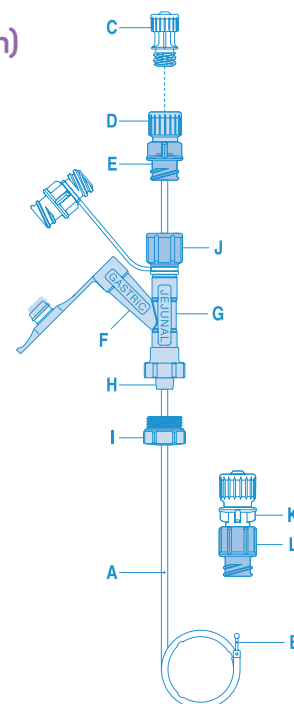


POMŮCKY PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY

Ostatní pomůcky
a příslušenství

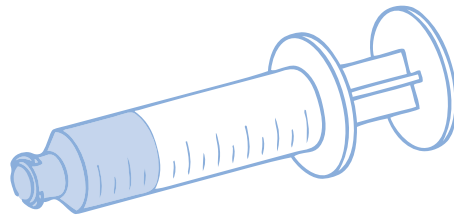


Pumpa pro aplikaci enterální výživy

- malá, kompaktní, praktická
- spolehlivé, bezpečné a snadné použití
- výdrž baterie 24 hodin
- snadno omyvatelná i pod tekoucí vodou
- zákaznická podpora (pravidelné technické kontroly a servis)
- zdravotnický prostředek

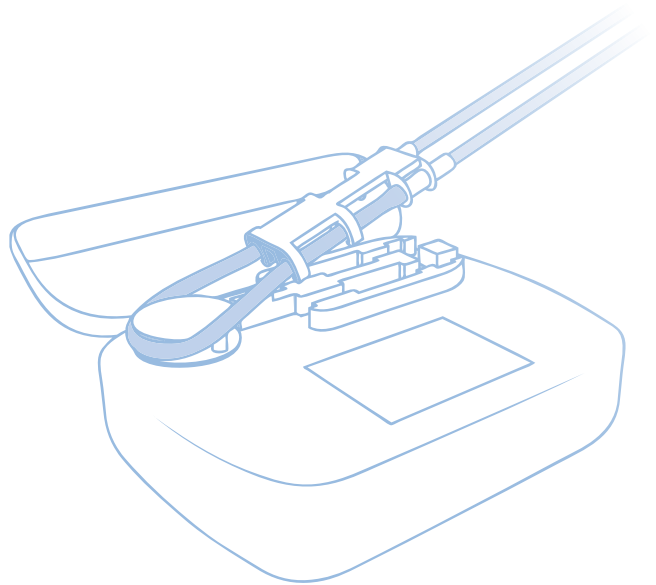

Enterální pumpa Flocare® Infinity™

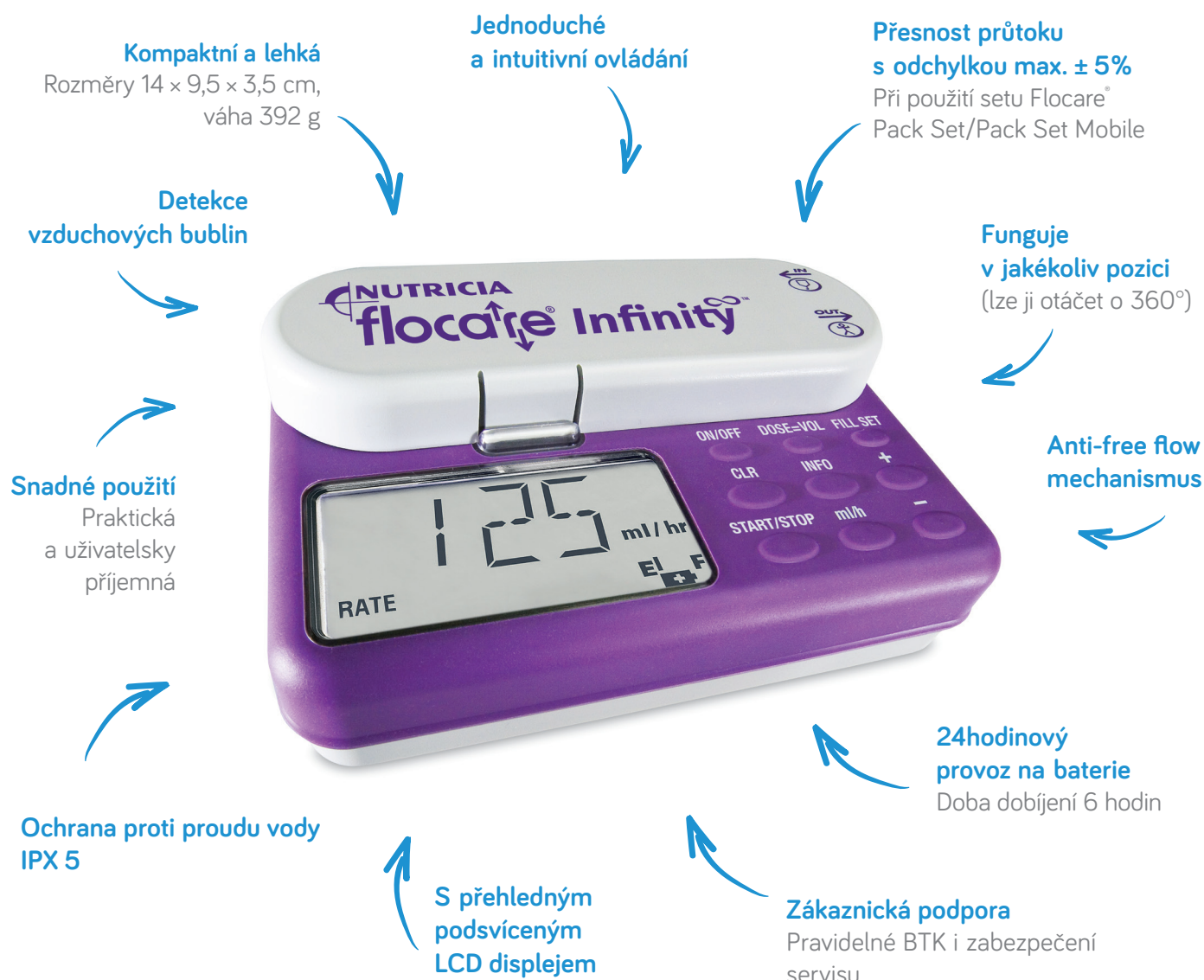

Flocare® Infinity® Enteral Feeding Pump Enterální pumpa



APA: 2 218 940
REF: 35 676




Pumpa je určena pro aplikaci enterální výživy
pouze prostřednictvím těchto aplikačních setů:


- Flocare® Infinity™
Pack Set (586 514)



- Flocare® Infinity™
Pack Mobile Set
(586 520)

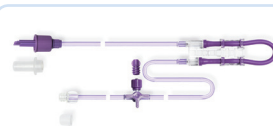

- Flocare® Infinity™
Pack Mobile Set
W/O MP (586 484)

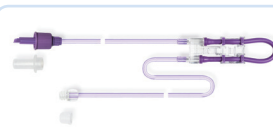

Přehled konektorů a adaptérů

zdravotnické prostředky

Bolusový adaptér

- Adaptér na hrdlo vaku sondové enterální výživy pro pohodlné a hygienické natažení bolusové dávky přímo do stříkačky ENFit™.

Flocare® Bolus Adaptor
Flocare® Bolusový adaptér
na ENFit™ stříkačku



APA: 3 560 605
REF: 589 740

● Balení 1 ks

Adaptér na láhev

- Adaptér je určen pro podání sondové enterální výživy z láhví s hrdlem Ø 40 mm a Ø 26 mm. Je kompatibilní s láhvemi přípravku Infatrini a Infatrini Peptisorb.

Flocare® Universal Adapter
Cross Design
Flocare® Univerzální adaptér
na láhev



APA: 316 588 4
REF: 570 063

● Balení 1 ks

Nutricia Flocare® PEG konektory

- Náhradní konektory pro aplikaci výživy do PEG s ENFit™ konektorem. Kompatibilní s Nutricia Flocare ENFit™ enterální stříkačkou i výživovými sety.

Flocare® PEG Connector
10 CH10



APA: 3 403 970
REF: 591 397

● Balení 1 ks

Flocare® PEG Connector
14 CH14



APA: 3 403 962
REF: 591 395

● Balení 1 ks

Flocare® PEG Connector
18 CH18



APA: 3 403 954
REF: 591 396

● Balení 1 ks

Přechodné konektory

- Přechodné konektory Nutricia Flocare® zajišťují kompatibilitu systému ENFit™ s ostatními systémy enterální výživy.

Transition Step Connector
to Funnel Tube
Transition stupňovitý konektor



APA: 3 286 995
REF: 589 828

● Balení 30 ks (6x5 ks)

Transition Connector
to Reversed Luer Medport
Transition konektor na sondu Luer



APA: 3 287 019
REF: 589 733

● Balení 30 ks (6x5 ks)

Transition Connector
to Oral/Luer Syringe
Transition konektor na stříkačku Oral/Luer



APA: 3 358 687
REF: 589 738

● Balení 30 ks (6x5 ks)

Transition Connector
to Female Luer Syringe
Transition konektor na set Luer



APA: 3 287 027
REF: 589 735

● Balení 30 ks (6x5 ks)

Přehled produktů

Název produktu	Obrázek produktu	APA kód	REF kód	EAN kód	Balení
Nutricia Flocare® vyživovací sety					
Flocare® Gravity Bottle Set		3 386 381	590 070	8 716 900 564 574	1 ks
Flocare® Gravity Pack Set		3 386 399	586 460	8 716 900 563 614	1 ks
Flocare® 800 Bottle Set		3 386 183	590 082	8 716 900 564 611	1 ks
Flocare® 800 Pack Set		3 386 175	586 512	8 716 900 563 652	1 ks
Flocare® Infinity Pack Set		3 386 415	586 514	8 716 900 563 690	1 ks
Flocare® Infinity Pack Mobile Set W/O MP		3 386 407	586 484	8 716 900 563 850	1 ks
Flocare® Infinity Pack Mobile Set		3 403 988	586 520	8 716 900 563 812	1 ks


Nutricia Flocare® vyživovací sety

Flocare® PEG Set (Ch10)		3 286 938	594 820	8 716 900 566 943	1 ks
Flocare® PEG Set (Ch14)		3 286 946	594 821	8 716 900 566 967	1 ks
Flocare® PEG Set (Ch18)		3 286 953	594 822	8 716 900 566 981	1 ks

Nutricia Flocare® sondy Bengmark®

Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch8-145 cm)		3 404 002	594 824	8 716 900 567 018	1 ks
Flocare® Bengmark® NI Tube (Ch10-145 cm)		3 403 947	594 825	8 716 900 567 032	1 ks

Nutricia Flocare® sonda PEG/J

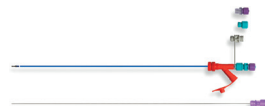Flocare® Bengmark® PEG/J for use with Flocare® PEG CH 18 (Ch9-105 cm)		3 286 920	594 823	8 716 900 567 001	1 ks
---	---	-----------	---------	-------------------	------

Nutricia Flocare® sondy


Flocare® PUR Tube (Ch8-110 cm)		3 286 987	594 569	8 716 900 566 608	1 ks
Flocare® PUR Tube (Ch5-50 cm)		3 286 979	594 566	8 716 900 566 547	1 ks
Flocare® Pursoft Tube with Guidewire (Ch8-125 cm)		3 286 961	594 580	8 716 900 566 806	1 ks

Nutricia ENFit® enterální stříkačka

D-3NTERAL™ Enteral Syringe 60 ml Single Use ENFit®		3 531 184	624 823	8 716 900 572 241	1 ks
--	---	-----------	---------	-------------------	------

Nutricia Flocare® enterální pumpa

Flocare® Infinity® Enteral Feeding Pump		2 218 940	35 676	8 712 400 856 768	1 ks
---	---	-----------	--------	-------------------	------

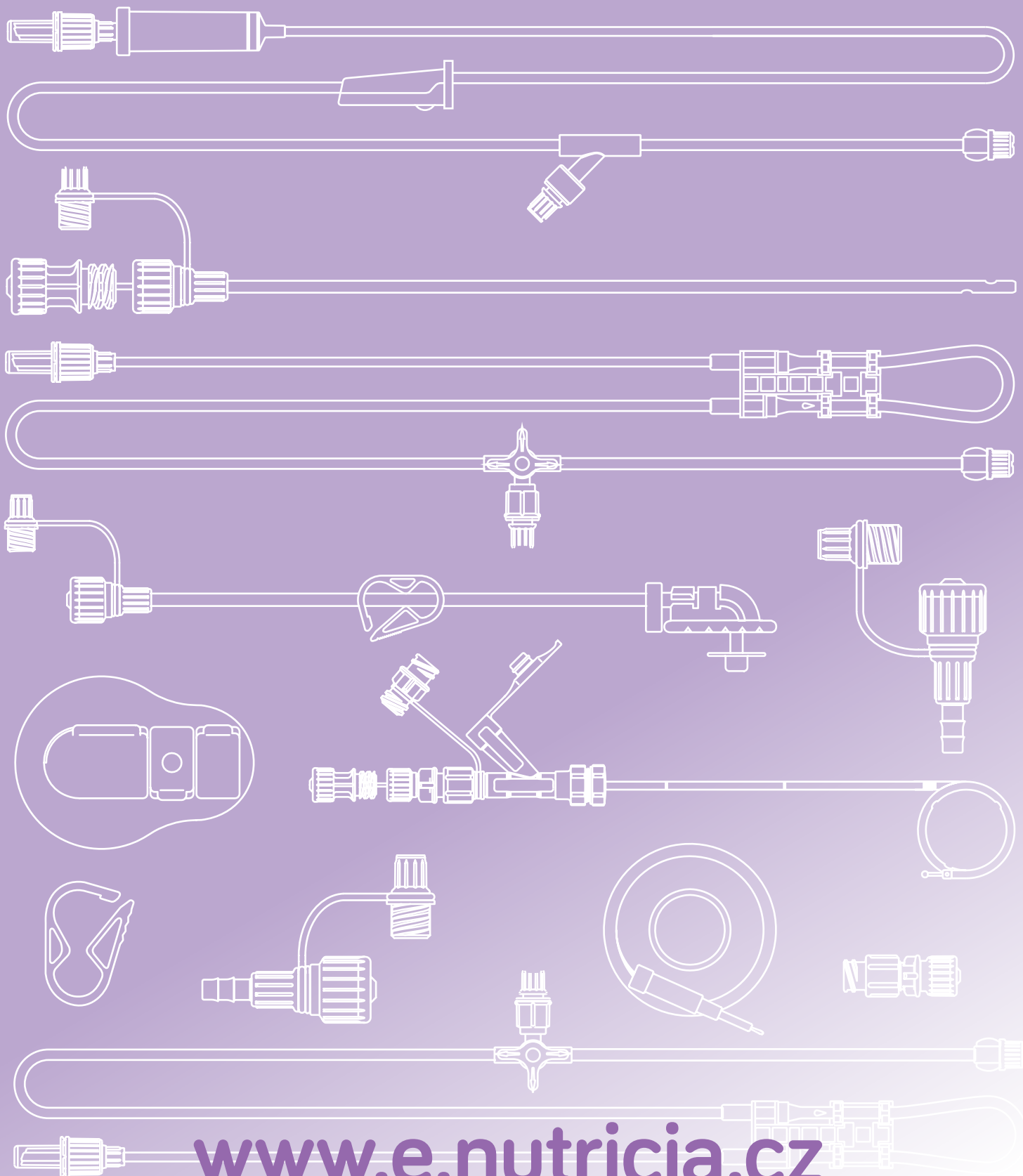

www.e.nutricia.cz



Distribuce v ČR: Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 – Chodov
Infolinka: +420 800 110 001
www.e.nutricia.cz

Uvedené zdravotnické prostředky a aplikační materiál jsou určeny k podání enterální výživy pod dohledem lékaře. Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost.

Více informací na obalech výrobků. Tiskové chyby vyhrazeny.

Čtěte pečlivě návody k použití zdravotnických prostředků na www.e.nutricia.cz.

NUTRICIA
floca^{re}